

# GBT LOUNGE


DOKONALÝ ZÁŽITEK Z PROFYLAXE  
MAXIMÁLNÍ ÚSPĚCH S GUIDED BIOFILM THERAPY



**EMS**   
MAKE ME SMILE.



# PROFYLAXE

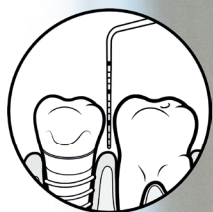

## 01. VYŠETŘENÍ A KONTROLA INFEKCE

- Začněte výplachem ústní vodou BacterX® Pro
- Vyšetřete stav chrupu, gingivy a tkáně parodontu
- Vyšetřete implantáty a tkáně v jeho okolí



## 02. DETEKCE PLAKU

- Ukažte pacientovi obarvený biofilm a problematické oblasti díky EMS Biofilm Discloser
- Barva vás bude řídit při odstraňování biofilmu
- Po odstranění biofilmu je detekce zubního kamene jednodušší




## 03. MOTIVACE

- Zdůrazněte význam prevence
- Poučte pacienty o hygieně v oblasti ústní dutiny
- EMS doporučuje mezizubní kartáčky nebo zubní nit, elektrické nebo manuální zubní kartáčky a zubní pastu AIRFLOW® s erytritolem pro každodenní péči



## 04. AIRFLOW® MAX

- Použijte AIRFLOW® MAX k ošetření přirozených zubů, zubních náhrad a implantátů
- Odstraňte biofilm supra- a subgingiválně do 4 mm za použití prášku AIRFLOW® PLUS 14 µm
- Odstraňte biofilm také z dásní, jazyka a patra

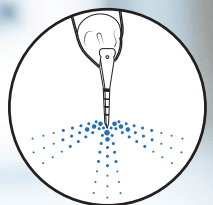


## 05. PERIOFLOW®

- Použijte prášek AIRFLOW® PLUS v hlubokých kapsách a kořenových furkacích přirozených zubů a na implantátech
- Používejte nové a tenčí jednorázové trysky PERIOFLOW®



## 06. PIEZON® PS

- Použijte mimořádně šetrnou ultrazvukovou koncovku EMS PIEZON® PS supra- a subgingiválně až do 10 mm
- Vyčistěte > 10 mm kapsy pomocí mini kyrety
- Použijte EMS PIEZON® PI MAX koncovku kolem implantátů subgingiválně až do 3 mm a na zubních náhradách

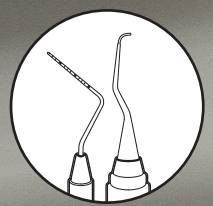

## 07. KONTROLA

- Udělejte finální kontrolu zbývajícího biofilmu
- Ujistěte se, že je zubní kámen stoprocentně odstraněn
- Překontrolujte přítomnost zubních kazů
- Proveďte fluoridaci
- Už žádný polishing



## 08. RECALL

- Naplánujte recall dle typu pacienta
- Zeptejte se svého pacienta, zda se mu ošetření líbilo



# NA MAXIMUM



”

GUIDED BIOFILM THERAPY -  
NEJKOMFORTNĚJŠÍ,  
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ  
A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  
PROTOKOL PRO ZUBNÍ  
ORDINACE.

Karen Davis, RDH, USA



**AIRFLOW**  
PROPHYLAXIS MASTER



# WELLNESS NA 9 M<sup>2</sup>



GBT Lounge je vhodný i do těch nejmenších ordinací. Obsahuje veškeré potřebné vybavení, které umožňuje nejlepší možné profylaktické ošetření a přizpůsobí se každé ordinaci. AIRFLOW® Prophylaxis Master, optimalizovaná ergonomie práce, komfortní křeslo s bočním vedením a jasné barvy nabízí "I FEEL GOOD" zážitek pacientům i ošetřujícím.



# VAŠE DENTÁLNÍ SPA



CABINET DES HALLES, NEUCHÂTEL, ŠVÝCARSKO







**CERTIFIED PRACTICE**

**GBT**



**NASKENUJTE QR KÓD  
A ZÍSKEJTE GBT CERTIFIKACI**



”

**RÁDA PACIENTŮM DOPŘEJI  
WELLNESS ZÁŽITEK  
PŘI ODBORNÉM  
PROFYLAKTICKÉM  
OŠETŘENÍ.**

Marleen Goossen, dentální hygienistka





# NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ



**DVA GBT LOUNGE NÁM  
PŘINÁŠÍ NAVÍC 300 000 EUR  
OBRATU ROČNĚ. I TO JE  
JEDEN Z MNOHA DŮVODŮ,  
PROČ SE GBT LOUNGE  
PRO MOJI ORDINACI  
VYPLATÍ.**

**Dr. Kathrin Bajrami-Kober**  
2 GBT Lounge instalovány od roku 2020  
Esslingen, Německo

ZAHNARZTPRAXIS BAJRAMI-KOBER, ESSLINGEN AM NECKAR, NĚMECKO





# PRO MOJI ORDINACI



## MÍSTNOST VĚNOVANÁ GBT

GBT Lounge je jedinečným řešením pro GBT ošetřování na nejvyšší úrovni.

Plně integrovaný přístroj AIRFLOW® Prophylaxis Master nabízí bezbolestné profylaktické ošetření na nejvyšší úrovni a pracuje s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® a PIEZON® PS/PI MAX. GBT Lounge nabízí ucelené řešení pro nejlepší možné GBT ošetření v optimalizovaném pracovním prostředí včetně veškerého potřebného vybavení.

## OPTIMÁLNÍ ERGONOMIE PRÁCE

GBT Lounge byl navržen pro lepší ergonomii práce ošetřujících. Boční vedení křesla nabízí mimořádný prostor pro nohy, čímž umožňuje udržet ergonomickou polohu po celou dobu ošetření a zároveň je možné ošetřit pacienta ze všech úhlů.

GBT židle přispívá k ergonomickému polohování a umožňuje ošetřujícímu pracovat ve zdravé pozici po celý den. Díky integrovanému přístroji AIRFLOW® Prophylaxis Master a bezdrátovému pedálu nepřekáží na podlaze žádné kabely. Bezdotykové dávkovače a světlo s mimořádným dosahem usnadňují práci a udržují nejvyšší možnou úroveň hygieny.

## WOW EFEKT PRO VAŠE PACIENTY

Díky jasným barvám, příjemnému Ultra Relax polstrování křesla s pamětovou pěnou a komfortnímu GBT ošetření, přináší GBT Lounge pacientům jedinečný zážitek. Profylaktické ošetření v prostředí připomínajícím wellness vaši ordinaci odliší a pacienti se k vám rádi vrátí na recall.



## ÚSPĚCH ORDINACE

"I FEEL GOOD" zážitek, který GBT Lounge nabízí, vede ke zvýšenému počtu recallů. Pacienti budou doporučovat vaši ordinaci rodině i přátelům, což vám přinese nové pacienty.

Poskytnutím výjimečného pracovního prostoru získáte snáze nové zaměstnance. GBT Lounge posune vaši ordinaci na vyšší úroveň a je zárukou obchodního úspěchu.



# GBT LOUNGE






# VŠE V JEDNOM



## AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

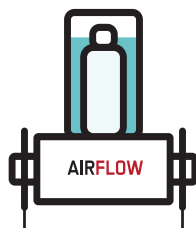

- Nabídněte bezbolestné profylaktické ošetření pomocí nejnovějších technologií, jako jsou AIRFLOW® MAX, PERIOFLOW® a PIEZON® PS/PI MAX
- Kompletně integrován do křesla

## BOČNÍ VEDENÍ KŘESLA



- Ultra Relax polstrování s paměťovou pěnou pro maximální komfort pacienta
- Maximalizovaný prostor pro nohy
- Ergonomie a flexibilita
- Vestavěný tácek s možností otáčení o 360°

## ŽIDLE



- Ergonomicky správné držení těla
- Sedlový typ židle
- Nastavitelný úhel sezení

## BEZDRÁTOVÝ PEDÁL



- Žádné kabely na podlaze
- Bezdrátové připojení k vašemu AIRFLOW® Prophylaxis Master

## LED SVĚTLO



- Intenzita až 50 000 Lux
- Bezdotykový senzor pro lepší hygienu

## NÁBYTEK A VYBAVENÍ\*




- Mycí jednotka
- Bezdotykové dávkovače na mýdlo a dezinfekci
- Úložný prostor na spotřební materiál až na 14 dní

\*Další vybavení GBT Lounge je dostupné dle aktuální nabídky v dané zemi.

## KONTAKTUJTE NÁS A POSUŇTE SVOU ORDINACI NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Naskenujte QR kód, vyplňte kontaktní údaje a GBT expert pro danou lokalitu se s vámi spojí pro naplánování GBT Lounge ve vaší ordinaci.

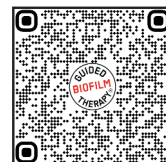



**"I FEEL GOOD"**

## GUIDED BIOFILM THERAPY



E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA  
Chemin de la Vuarpillière 31  
CH-1260 Nyon  
info.czsk@ems-ch.com

**EMS**   
MAKE ME SMILE.